

Silla Multipropósito

SMM-200

Silla Multipropósito Manual, ideal para usos en Proceso de Hemodiálisis, Quimioterapia, Toma de muestras y similares.



La **Silla Multipropósito Manual SMM-200** para uso hospitalario utiliza el poder de lo simple para traer a sus usuarios ergonomía, confort y facilidad de uso.

Nuestra silla les permite a los pacientes graduar la inclinación de la sección de espalda y la sección de pies de manera independiente. La Silla Multipropósito Manual SMM-200 puede configurarse en cualquier posición dentro de su rango de movimiento incluida la posición trendelenburg.




La tecnología de soporte de la **Silla Multipropósito Manual SMM-200** está pensada para aumentar el confort mejorando las condiciones de presión en la piel de nuestros pacientes. Su brazo retraible le permite al paciente ingresar a la silla de manera fácil y segura.



Apoya Brazos Ajustables


Para facilitar el ingreso y el egreso a la Silla Multipropósito Manual sus descansa brazos son ajustables liberando el espacio lateral.

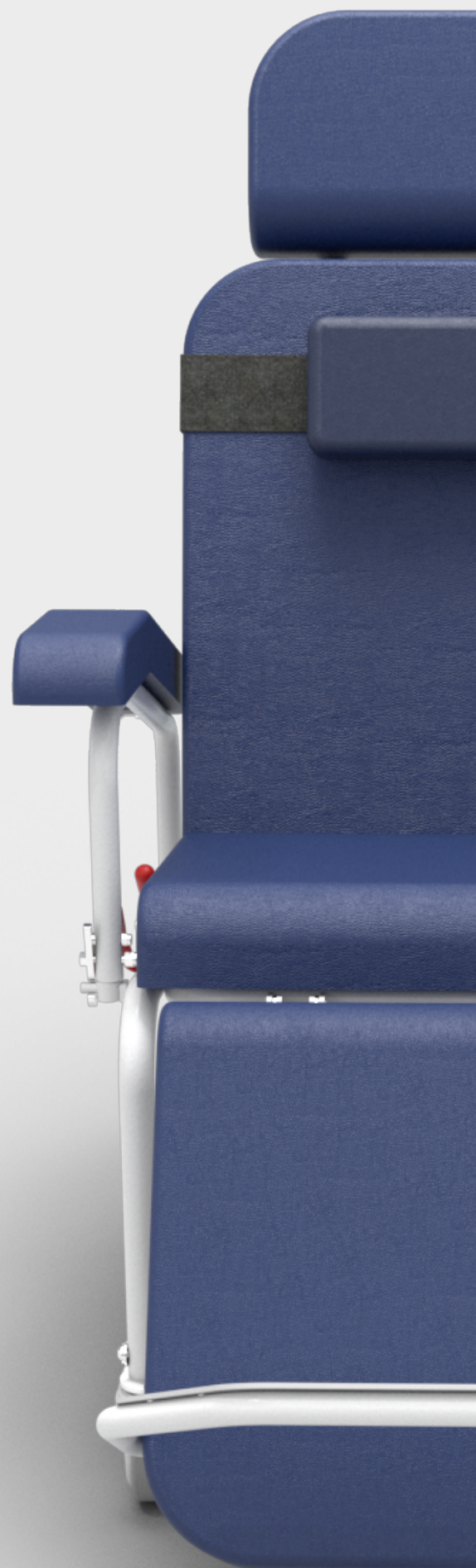

Espumas

Están diseñadas para que los pacientes obtengan el máximo confort, sobretodo en estancias prolongadas.

El diseño cuenta con una variedad de espumas con diferentes densidades, y capas superficiales de material similar al viscoelástico. El asiento cuenta con una superficie con geometrías que permiten distribuir mejor el peso del paciente.

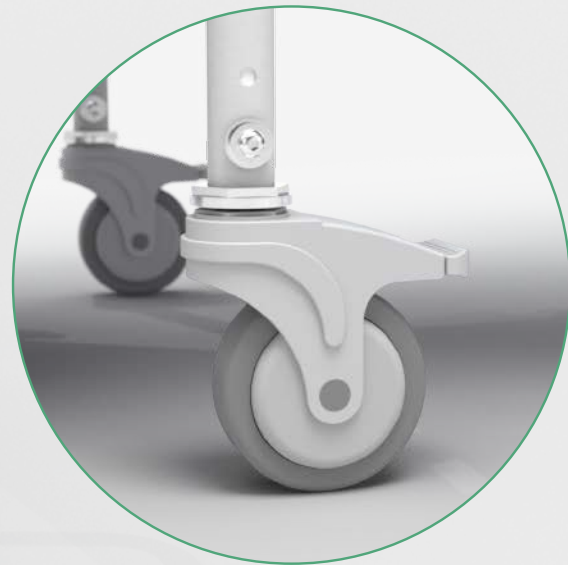

Ruedas

Posee cuatro (4) ruedas de 5" de diámetro, con sistema de freno individual, libres de mantenimiento, su superficie está fabricada en material sintético que garantiza mínimo ruido y no recolecta hebras o mugre.

Posiciones de la Silla Multipropósito SMM-200



Posición Sentado



Inclinación del Espaldar



Inclinación del Piecero



Trendelenburg

• • Estructura Reforzada

Fabricada en acero cold rolled resistente a la aplicación de desinfectantes de grado hospitalario.

• • Acabado

El acabado de la Silla se obtiene con pintura de aplicación electrostática en polvo, que aumenta la resistencia, la adhesión y la protección ante la corrosión, también es resistente a impactos y desinfecciones profundas.

• • Cabecero Móvil

El cabecero de la silla es móvil, se puede deslizar y ubicarlo a la altura deseada y en caso de requerirse también se puede quitar.

• • Receptáculos para Atril

La silla posee dos (2) receptáculos para atril porta sueros, están ubicados en la base en su parte trasera.

• • Accesorios Opcionales

(Estos accesorios no están incluidos y tienen un valor adicional, pregúntale a tu asesor)

- Atril Porta Suero
- Protector para Plano de Pies
- Mesa Abatible

Dimensiones Externas

80,8^{cm} x 135^{cm} +/-1^{cm}

Altura del Asiento

57^{cm} +/-1^{cm}

Inclinación del Espaldar

-10° a 110° +/-2°

Trendelenburg

10° +/-2°

Inclinación de Pies

10° a 25° +/-2°

Carga Segura de Trabajo

180^{kg}



INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A.

PBX: (+57 604) 372 30 31

Línea Nacional: 01 8000 180 654

Calle 67B No. 45A - 82

Itagüí - Colombia

•••

servicioalcliente@lospinos-sa.com

www.lospinos.com.co

Copyright © 2024



SC1332-1



DM-CER158131